


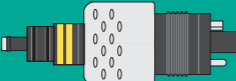
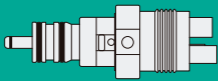




Perio-Mate kompletní systém

Model:	Objednací kód:		Druhy připojení:
PER-PTL-P	Y1002654		NSK připojení
PER-KV-P	Y1002655		KaVo® připojení
PER-SR-P	Y1002656		Sirona® připojení
PER-WH-P	Y1002657		W&H® Roto Quick připojení
PER-BA-P	Y1002658		Bien-Air® Unifix® připojení
PER-M4-P	Y1002659		Připojení na turbínovou hadici MIDWEST/M4
PER-B2-P	Y1002660		Připojení na turbínovou hadici BORDEN/B2

Kompletní set obsahuje

- násadec • 1x prášek 100 g • jednorázové špice (40 kusů) • sada na čištění a údržbu



Perio-Mate špice

Hygienické jednorázové špice

Model: **Perio-Mate Nozzle Tip**

Objednací kód: **Y1002741**

- 40 kusů v balení



Perio-Mate Powder

Prášek pro subgingivální čištění

Na bázi glycinu

Model: **Perio-Mate Powder**

Objednací kód: **Y900938**

- 4 x 100 g v balení

Klinický postup

- Ideální čas pro odstranění biofilmu zevnitř kapsy je dvacet sekund na zub (pět sekund z každé strany).
- Lze použít do 5 mm od oblasti zasažené zánětem dásní.

*Protokoly s klinickými případy jsou k dispozici na vyžádání, lze je také nalézt na našich webových stránkách www.nsk-inc.com.




Omyvatelné v thermodesinfektoru

* Zásobník prášku a krytku zásobníku nelze omyvat v thermodesinfektoru



Autoklávatelné až do 135°C

Obrázky jsou pouze ilustrativní, změny v designu bez upozornění jsou možné.

<p>LIEHMANN CZ, s.r.o. Petrohradská 6/7, 101 00, Praha 10 Vjezd pro parkování ulicí Novgorodská 6 Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716, 734 312 063 e-mail: liehmann@volny.cz</p>	<p>Váš prodejce NSK:</p>	<p>Expert Perfection® </p> <p>www.liehmann.cz www.stomaobchod.cz</p>
<p>NSK EUROPE GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 8, D-65760 Eschborn, Germany, tel.: +49/6196/77606-0, fax: +49/6169/77606-29</p>		

Změny vyhrazeny.

NSK
MADE IN JAPAN

Perio-Mate



Odstraňovač subgingiválního plaku a biofilmu

Perio-Mate je používán v léčbě parodontálních kapes a peri-implantitidy. Během zákroku je velmi důležité vyhnout se poranění měkkých tkání a kořenových povrchů uvnitř jemného parodontu. Perio-Mate je vybaven ultrajemným vodním sprejem a práškem Perio-Mate na bázi glycinu, což zaručuje šetrné odstranění biofilmu z parodontálních chobotů za pouhých 20 sekund.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti dynamiky tekutin, NSK vymyslela bezpečnou a nanejvýš efektivní metodu tlakového spreje, který umožňuje rychlé a přesné odstranění plaku ze subgingivální oblasti. Kombinace Perio-Mate tenké trysky a pružné plastové trysky umožňuje bezpečnější postupy a nabízí optimální viditelnost a funkčnost. Tvar a složení trysky jsou uživatelsky jednoduché a umožňují snadný přístup k měkkým tkáním a zajišťují důkladnou a pohodlnou léčbu.



Výhody

- Inovativní tryska NSK • Hygienické jednorázové tryskové špice
- Štíhlý design • Hladké otáčení trysky o 360°
- Jednoduché čištění a údržba • Ergonomická trysková špice
- Regulace toku prášku prostřednictvím Power Control kroužku

LIEHMANN CZ

Výhradní autorizovaný zástupce NSK pro ČR

Perio-Mate

Odstraňovač
subgingiválního plaku a biofilmu

Inovativní tryska NSK



Nová tryska NSK je vyrobena z poloprůhledného materiálu, který napomáhá lepší viditelnosti při ošetření. Jednorázové trysky zaručí hygienickou bezpečnost a stále stejnou účinnost.

Flexibilní plastová tryska zajistí dokonalé a šetrné ošetření dentálních kapes




Tenká, flexibilní tryska se hladce po povrchu zubu dostane i do těžce přístupných míst aniž by vznikl nepříjemný pocit pro pacienta. Jednoduchým pohybem prstu natočíte trysku do správné polohy a tím zajistíte ideální roztrhání prášku.

Tryska jejíž design je založený na analýze průtoku tekutin, zajišťuje bezchybný průtok prášku




NSK využívá zkušenosti z vývoje technologie turbín a přitom bere v úvahu, jak lékař musí manévrovat v omezeném prostoru. Výsledkem je, že ideální práškový sprej přesně odstraní subgingivální plak a biofilm s minimálním poškozením měkkých tkání.

Tenká tryska umožňuje práci v úzkých mezerách dutiny ústní

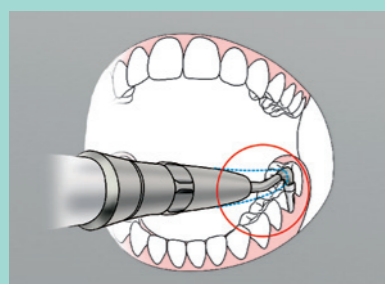

Tryska Perio-Mateu usnadňuje práci v těžko přístupných prostorech dutiny ústní a zároveň zajišťuje vysokou viditelnost při práci. Tvar trysky je navržen tak, aby zajistil snadný přístup k oblastem, které vyžadují vložení rukojeti pod úhlem, například mezi stoličkami.

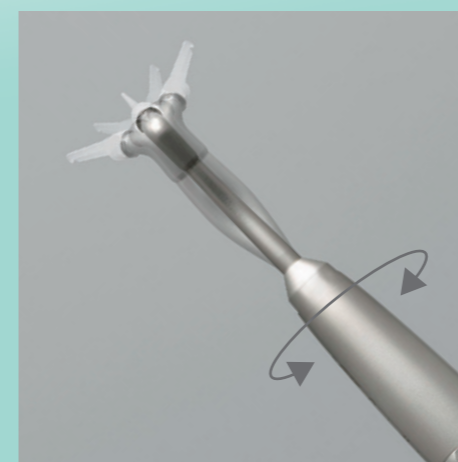

Hladké otáčení o 360° pro bezpečnou a přesnou činnost

Násadec se může snadno otáčet pomocí prstů i během zákroku. Tryska umožňuje snadný přístup k těžko přístupným místům a nemá nepříznivý vliv na sousední zuby a kontury.



Ovládací kroužek průtoku prášku

Ovládacím kroužkem můžete jednoduše, pomocí jednoho prstu, ovládat intenzitu proudění prášku až do jeho úplného uzavření a použít pouze vodního spreje pro výplach. Jednoduše a efektivně odstraníte biofilm a ošetříte místa se zánětem a to i v citlivých parodontálních chobotech a kolem implantátů.



Údržba

Tryska se špičkou, násadec a zásobník na prášek jsou snadno demontovatelné pro čištění a dekontaminaci. Čištění trysky je jednoduché díky příslušenství, které je součástí přístroje.